

Weitere LIGASANO®-Produkte
zur Versorgung des diabetischen Fußes

LIGASANO® weiß: Zehenshläuche

| Art.-Nr. | PZN | Versandereinheit |
|-----------|----------|--|
| 15391-012 | 17251640 | 12 Stück 6x3,5/2,5 cm x 1 cm steril |
| 15392-012 | 17251657 | 12 Stück 6x2,5/1,5 cm x 1 cm steril |
| 15393-012 | 17251663 | 12 Stück 6x1,5 cm x 1 cm steril |
| 15070-012 | 17250942 | 12 Stück 6x3,5/2,5/1,5 cm x 1 cm unsteril |

LIGASANO® weiß: Hallux valgus- und Großzehenverband

| Art.-Nr. | PZN | Versandereinheit |
|-----------|----------|---|
| 15395-004 | 17251700 | 4 Stück Ø 4,5 / 4,0 x 12 cm steril |
| 15075-002 | 17250959 | 2 Stück Ø 4,5 / 4,0 x 12 cm unsteril |
| 15075-006 | 17250965 | 6 Stück Ø 4,5 / 4,0 x 12 cm unsteril |

LIGASANO® weiß: Hammerzehenverband

| Art.-Nr. | PZN | Versandereinheit |
|-----------|----------|------------------------------------|
| 15078-012 | 17250988 | 12 Stück Ø 3,5 cm x 12 cm unsteril |

LIGASANO® weiß: Finger- und Zehenverband mit Kleberand

| Art.-Nr. | PZN | Versandereinheit |
|-----------|----------|---|
| 15215-001 | 17251189 | 1 Stück 200 x 14 x 0,5 cm unsteril gerollt, abschneidbar, mit Klebekante ergibt ca. 40–50 Zehenshläuche |
| 15394-015 | 17251692 | 15 Stück Zehenslauch/-kappe steril für Zehendurchmesser von 1,0–3,8 cm |



Made in Germany

LIGAMED® medical Produkte GmbH

Pfannenstielstr. 2 • D - 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046 • Fax 09103 / 2796 • E-Mail: info@ligamed.de

www.ligasano.com



PLANTAFIT


Intelligente
Druckentlastung.
Einfach wirksam.




Für den
diabetischen
Fuß

LIGASANO®
wird einfach

Konzipiert für die Interimsversorgung beim diabetischen Fuß in Kombination mit einem Verbandschuh:

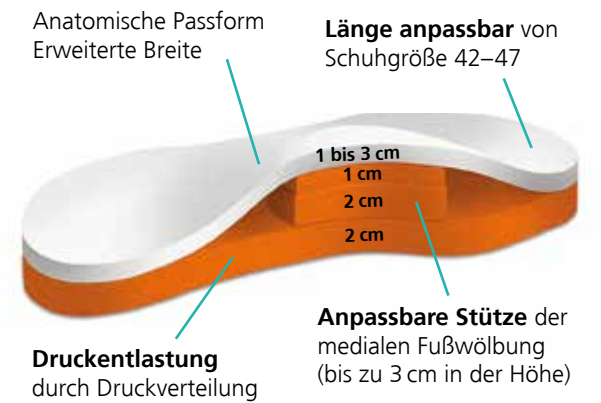

Einfache Anpassung der Größe und Unterstützung der medialen Wölbung, durch entfernbare Konturen und Klebepunkte auf den Unterseiten:

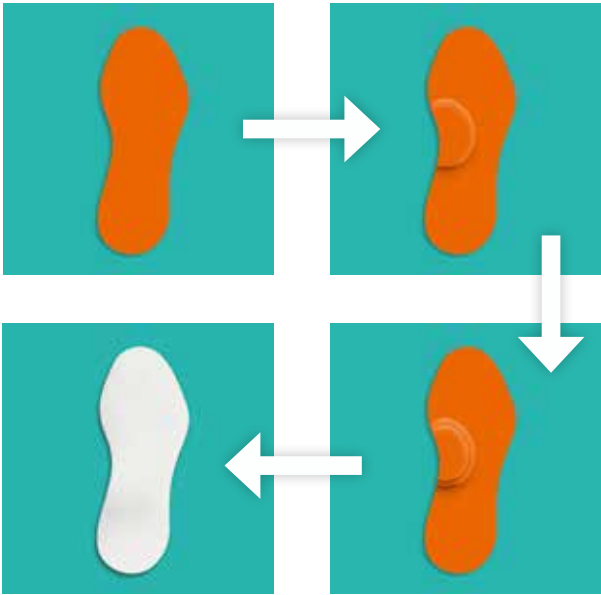

Da die Druckreduktion des Materials mit zunehmendem Gewicht sinkt, empfehlen wir Ihnen folgende Dicken der Einlage LIGASANO® weiß:

- < 80 kg: 1 cm LIGASANO® weiß
- 80 bis 100 kg: 2 cm LIGASANO® weiß
- >100 kg: 3 cm LIGASANO® weiß

Wie effektiv ist LIGASANO® PLANTAFIT®?

Anwender-Tests zeigten folgende Ergebnisse:

- ▶ Reduktion der Druckspitzen um ca. 20 %
- ▶ Reduktion des Durchschnitts-Druck um knapp 30 %
- ▶ Verdoppelung der Auflagefläche des Fußes:
Effektive Druckentlastung durch Druckverteilung.

Auch bei der zweiten Messung nach 24 Stunden Tragezeit zeigten sich noch ähnliche Werte: LIGASANO® PLANTAFIT® bleibt wirksam – insbesondere im medialen Vorfuß.

PLANTAFIT® wirkt auf den gesamten Fußdruckverlauf, steigert die Kontaktfläche, entlastet systematisch und reduziert Spitzendrücke nicht nur lokal, sondern flächig.

Eine ideale Kombination:

LIGASANO® weiß
Gemischtporiges,
vergleichsweise grobporiges
geschäumtes Polyurethan



LIGASANO® orange
Offenporiges,
grobporiges Zellgitter
mit entfernten Zellmembranen



| Art.-Nr. | PZN | Versandereinheit |
|-----------|----------|--|
| 36198-010 | 20279458 | LIGASANO® PLANTAFIT® Set, Gr. 42 – 47 (linker und rechter Fuß) bestehend aus: – 2 x LIGASANO® PLANTAFIT® orange 2 cm in Fußform plus Unterstützung der medialen Wölbung in 2 cm und 1 cm – 2 x LIGASANO® PLANTAFIT® weiß in Fußform, 1 cm dick – 2 x LIGASANO® PLANTAFIT® weiß in Fußform, 2 cm dick – 2 x Fixierstrumpf |
| 15197-020 | 20346427 | 20 Stück LIGASANO® PLANTAFIT® weiß, 1 cm dick, in Fußform, Gr. 42 – 47, Nachkaufpackung |
| 15198-020 | 20346433 | 20 Stück LIGASANO® PLANTAFIT® weiß, 2 cm dick, in Fußform, Gr. 42 – 47, Nachkaufpackung |